


「名捕」系列

CAPTOR
颅内取栓支架

SUPSELEK
微导管

extraflex
远端通路导管

FULLBLOCK
封堵球囊导管

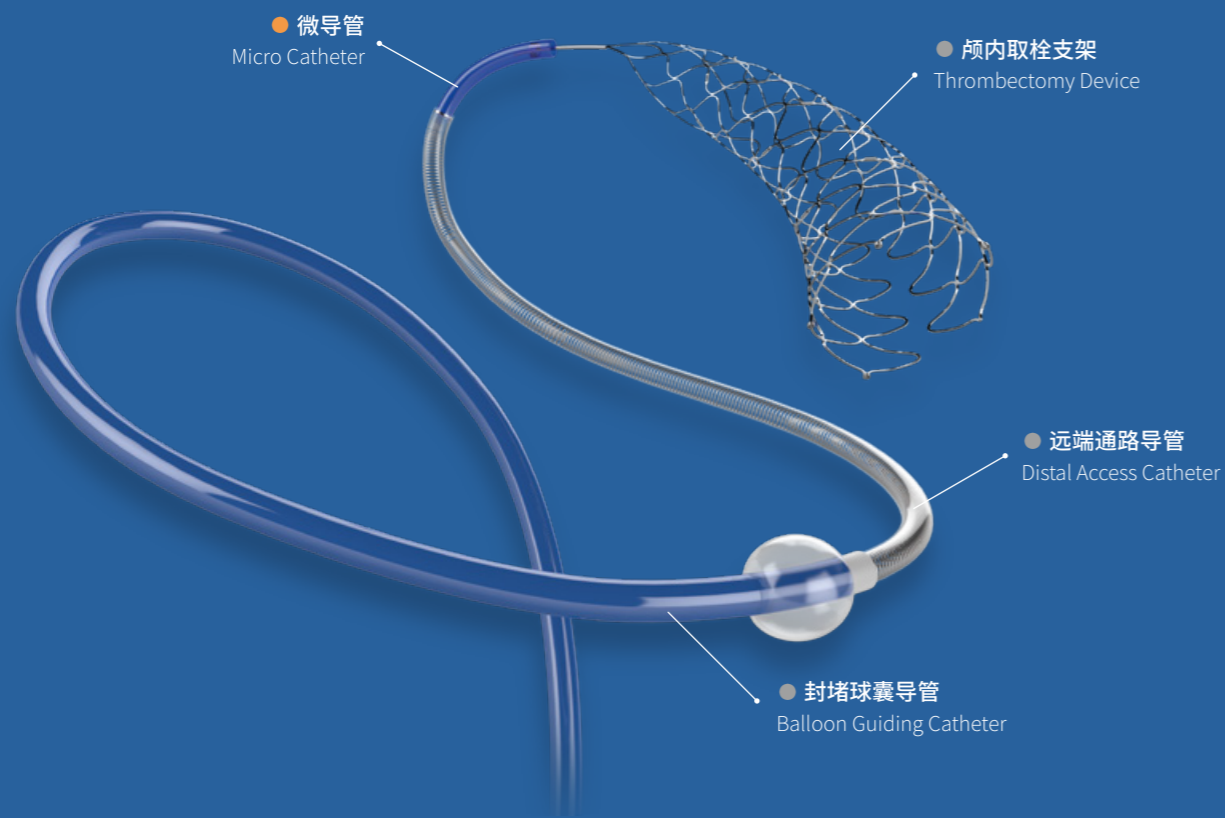

SUPSELEK 微导管产品规格


型号	规格	有效长度 L (cm)	外径 OD (Fr)	内径 ID (inch)
21	SM*MC-21110	110	2.5	0.021
	SM*MC-21130	130	2.5	0.021
	SM*MC-21153	153	2.5	0.021
27	SM*MC-27110	110	2.9	0.027
	SM*MC-27130	130	2.9	0.027
	SM*MC-27145	145	2.9	0.027
	SM*MC-27153	153	2.9	0.027



「名捕」系列

Micro Catheter
微导管

长驱直入
虽远必达

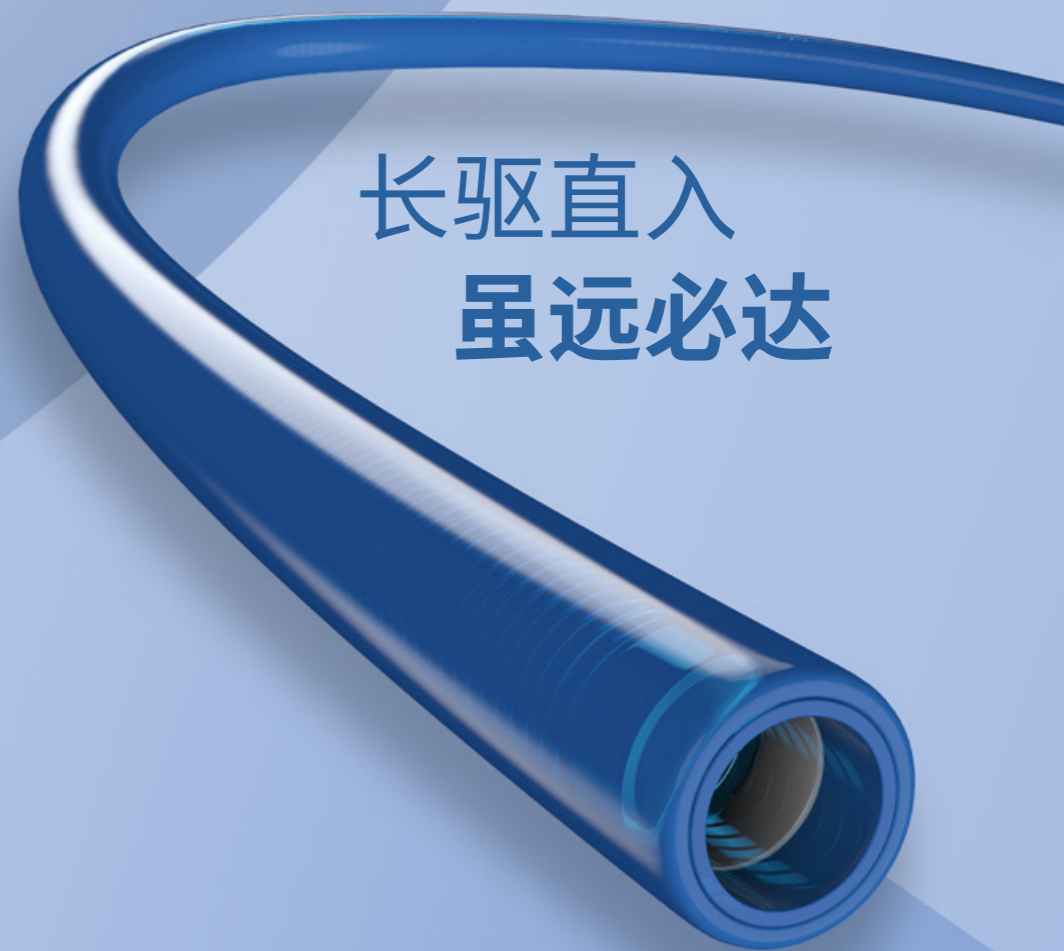


SUPSELEK

头端柔软性测试

在万能试验机上，设定测试速率为2mm/min 测试导管头端轴向绝对下压力为2mm时的最大屈服力。

心玮 SUPSELEK 微导管较对照组柔软性更好。

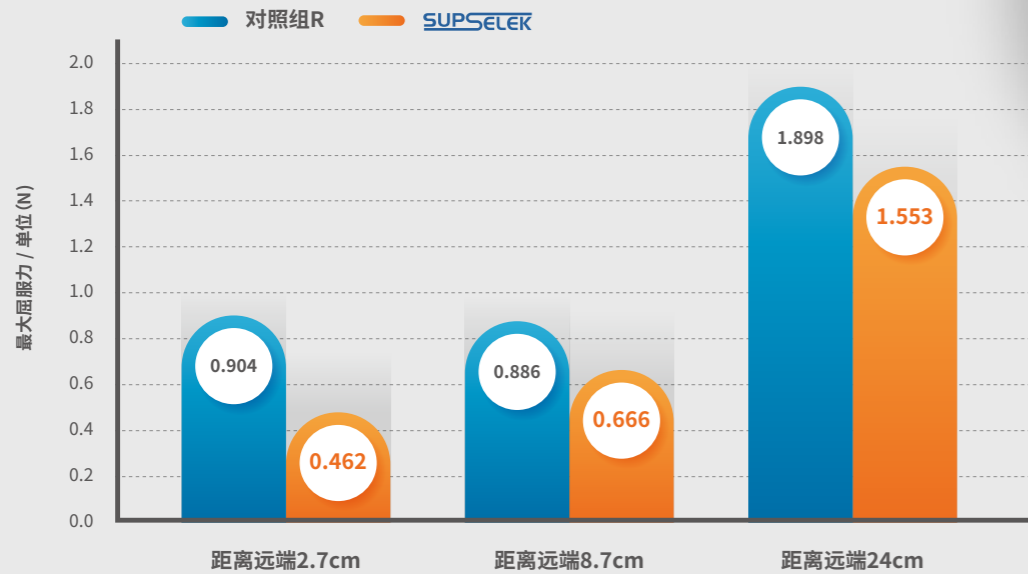

153cm 有效长度

● 良好的支撑性和扭控性

多段设计，近端支撑和远端的柔软完美平衡

● 更高可视性，定位更清晰

远端铂铱合金显影环

● 爽滑性高

表面亲水涂层推送阻力更小

● 头端柔软，手术更安全

独创激光头端无创处理