


ThruVas[®] 玮脉[®] 颈动脉球囊扩张导管产品顺应性

压力 / ATM	不同充盈压力下球囊直径 / mm										
	2.0mm	2.5mm	3.0mm	3.5mm	4.0mm	4.5mm	5.0mm	5.5mm	6.0mm	6.5mm	7.0mm
7	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7
8	2.03	2.53	3.05	3.54	4.04	4.55	5.05	5.56	6.06	6.58	7.07
9	2.05	2.56	3.09	3.59	4.09	4.59	5.11	5.61	6.13	6.65	7.14
10	2.07	2.59	3.14	3.63	4.13	4.64	5.16	5.67	6.19	6.72	7.21
11	2.1	2.63	3.19	3.68	4.18	4.69	5.21	5.73	6.26	6.78	7.28
12	2.13	2.67	3.24	3.73	4.23	4.73	5.26	5.79	6.32	6.84	7.35
13	2.16	2.71	3.29	3.77	4.27	4.78	5.31	5.85	6.38	6.9	7.42
14	2.19	2.75	3.33	3.82	4.32	4.83	5.37	5.92	6.45	6.97	7.49
15	2.23	2.79	3.38	3.87	4.37	4.88	5.42	5.98	6.52	7.04	7.56
16	2.27	2.83	3.43	3.92	4.42	4.93	5.47	6.04	6.58	7.11	7.63
17	2.31	2.87	3.48	3.97	4.47	4.99					

■ 命名压 (NP) ■ 额定爆破压力 (RBP)

导管有效长度 **140cm** 快速交换长度 **26cm** 兼容导管 **6F** 兼容导引导丝 **0.014"**

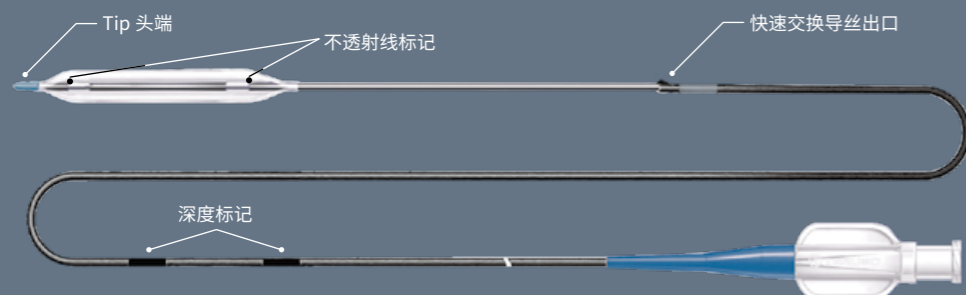

ThruVas[®] 玮脉[®] 颈动脉球囊扩张导管产品规格

直径	长度	20mm	30mm	40mm
2.00mm		●		●
2.50mm		●		●
3.00mm		●		●
3.50mm		●	●	●
4.00mm		●	●	●
4.50mm		●	●	●
5.00mm		●	●	●
5.50mm		●	●	●
6.00mm		●	●	●
6.50mm		●	●	●
7.00mm		●	●	●



ThruVas[®] 玮脉[®]


PTA Balloon
Dilatation Catheter

颈动脉球囊扩张导管



精益求精“颈”
一脉贯通

品质工艺 安全护航

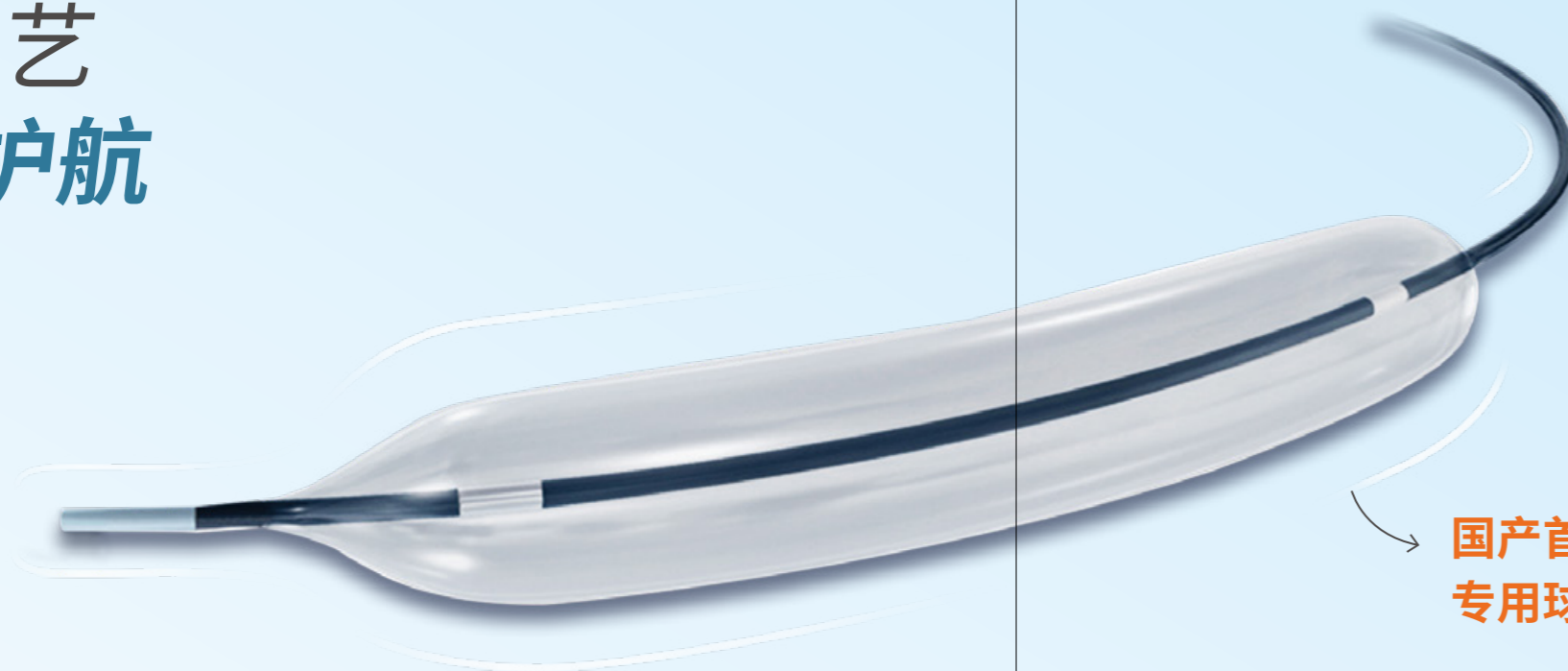

国产首个颈动脉狭窄
专用球囊扩张导管

材质分级 有效扩张

外径更小

三翼 / 五翼折叠工艺，球囊通过外径更小，减少斑块触碰，安全性更佳

泄压更快

颈动脉专用球囊扩张导管，泄压更快，降低并发症发生率


顺应性更好

Pebax/ 尼龙分级半顺应性材质，改善“狗骨头”效应，优化球囊扩张性能


扩张性更稳

耐高压球囊囊体，爆破压状态疲劳测试，球囊扩张性能稳定


● 球囊外径 (mm)

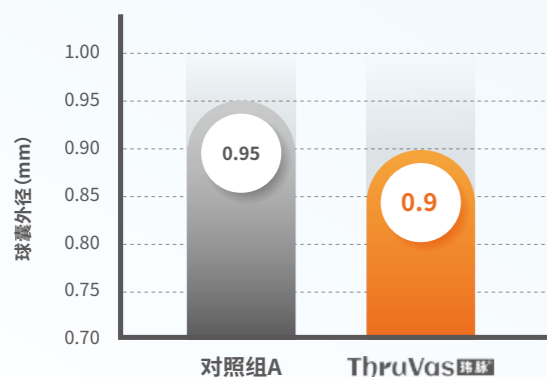

● 球囊泄压时间 (s)

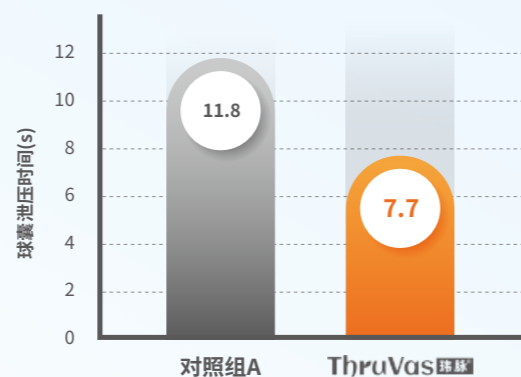

● 球囊顺应性变化

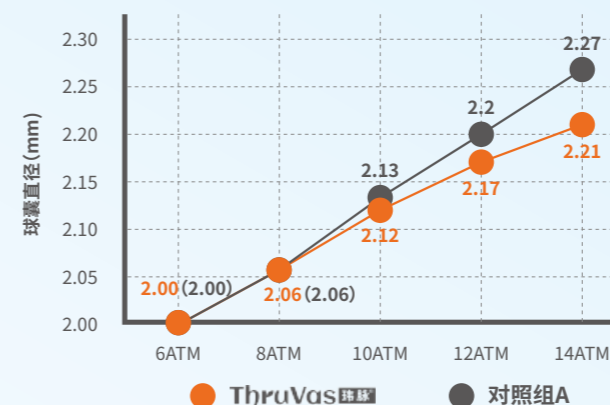

● 10次扩张到爆破压 17atm

